

PRZYRZĄD TRENINGOWY - SYMULATOR ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH

TY 9619-001-42529619-2001

1. Opis przyrządu.

1.1 Przyrząd treningowy jest przeznaczony do trenowania ludzkiego organizmu w celu osiągnięcia kondycji fizjologicznej, osiąganej przy wykonywaniu ćwiczeń fizycznych.

1.2 W wyniku tych ćwiczeń zwiększa się zawartość dwutlenku węgla we krwi tętniczej. Osiągamy to poprzez wdychanie przez niego powietrza, w którym systematycznie zwiększa się koncentracja CO₂.

1.3. Przyrząd treningowy jest przeznaczony do użytku indywidualnego, jednakże sterylizowany może być używany przez wiele osób.

1.4. Konstrukcja przyrządu treningowego 1A posiada patent RF nr. 2189837 na wynalazek „Aparat jest przeznaczony do formowania aktywnego fizjologicznego środowiska oddechowego z powietrza wydychanego i atmosferycznego”. Autorzy N. A. Agadzianian, J. N. Miszustin, S. F. Levkin.

2. Budowa, części składowe

Poz. 1	Podstawa	-1 szt.
Poz. 2	Pokrywa	-1 szt.
Poz. 3	Komora środkowa	-1 szt.
Poz. 4	Szklanka	-1 szt.
Poz. 5	Pokrywa szklanki	-1 szt.
Poz. 6	Rurka oddechowa	-1 szt.
Poz. 7	Ustnik	-1 szt.
Poz. 8	Zacisk nosowy	-1 szt. /zmieniony/

3. Montaż przyrządu treningowego.

Przyrząd należy zmontować zgodnie z zamieszczonym obok schematem.

3.1. Na **etapie pierwszym** montaż przyrządu jest prosty. Pokrywę szklanki umieszczamy w szklance tak, aby oznakowanie szklanki (4) było pod cyfrą 1 na pokrywie (5).

Jeden koniec rurki oddechowej należy połączyć z występem pokrywy szklanki, drugi z ustnikiem.

3.2. Na **etapie drugim, trzecim i czwartym** montujemy przyrząd kompletnie. Pokrywę szklanki należy umieścić w szklance tak, aby oznakowanie szklanki było pod cyfrą 1 na pokrywie szklanki.

Podstawę należy połączyć z pokrywą. Występ wewnętrznej strony pokrywy (rys. 2) powinien zbiegać się z zagłębieniem podstawy (rys.4). Obie części są dobrze złożone gdy przy obrocie usłyszymy charakterystyczne kliknięcie.


Szklanke, zmontowaną z pokrywką szklanki, należy umieścić w podstawie przez otwór w pokrywie.

Środkową komorę również należy umieścić na podstawie przez otwór w pokrywie. Jej położenie należy ustalić na podstawie instrukcji zgodnie z adnotacją o pozycji środkowej komory (rys. 1).

Jeden brzeg rurki oddechowej należy połączyć z występem pokrywy szklanki drugi z ustnikiem.

Uwaga. Konstrukcja zacisku nosowego (8) zastała zmieniona przez producenta.

Montaż przyrządu treningowego

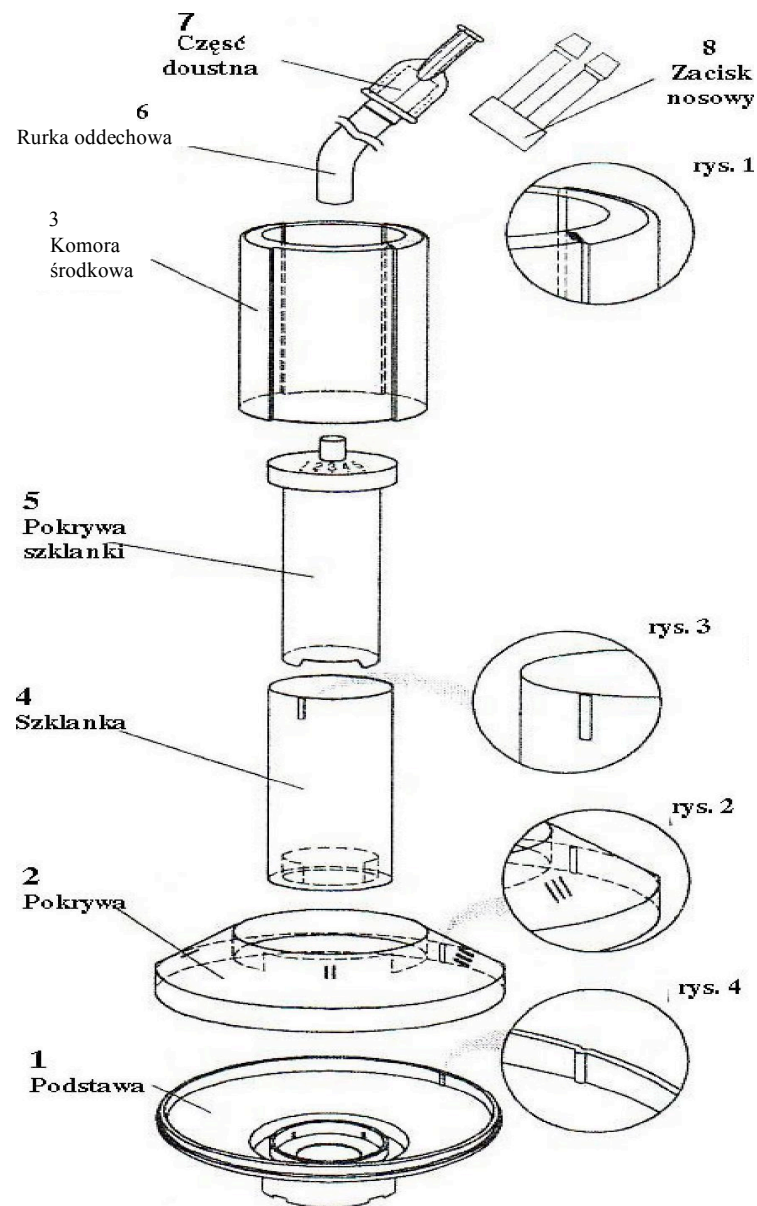

4. Obsługa techniczna oraz zasady przechowywania

- 4.1. Po każdym przebytych etapie według instrukcji należy rozmontować przyrząd treningowy, wytrzeć wszystkie części ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń oraz wysuszyć.
- 4.2. Przyrząd treningowy należy przechowywać w woreczku foliowym lub kartonie.

5. Technika bezpieczeństwa

Wszystkie części można sterylizować roztworem wody utlenionej poprzez zanurzenie na 30 minut do 3 % roztworu wody utlenionej z 0,5 % płynu do mycia naczyń w temperaturze 18-24°C.

6. Świadectwo aprobaty

Przyrząd treningowy odpowiada warunkom technicznym.

7. Gwarancje producenta

Producent zapewnia sprawność przyrządu treningowego na okres 18 miesięcy od daty produkcji.

8. Tryb składania reklamacji

Reklamacje należy zgłaszać w trybie ustalonym dla spółki-producenta pod adresem: 443051 m. Samara, ul. Jenisejskaja 62A, Spółka naukowo- produkcyjna „Samozdraw”. Tel.: (846-2) 58-44-31.

UWAGA!

Przed pierwszym użyciem przyrządu treningowego, należy wytrzeć wszystkie jego części ciepłą przegotowaną wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

**Spółka naukowo-produkcyjna
„SAMOZDRAW”**

INFORMACJA OGÓLNA

**PRZYRZĄD TRENINGOWY - SYMULATOR
ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH**

TY 9619-001-42529619-2001

www.samozdraw.pl